

Gun Massager  
ماساژور تفنگی

RT - 1052  
USER MANUAL دفترچه راهنما

ISO : WI-12-005-00

ما به طور روزمره در دنیای مطالبه گر امروز فشار و استرس زیادی متحمل می شویم و در راستای حفظ سلامتی نیاز هست که در دنیای پر از هیاهو به دنیای پر از حرکت تمام عیار انتقال یابیم

این دستگاه ساخته شده با مکانیزم موتور قدرتمند فرکانس بالا با ضربات عمیق، که می تواند ضربه های موثری با هدف به روزرسانی ماهیچه های تحت فشار و ریکاوری بعد از ورزش را آسان کند  
طراحی سبک، بی صدا، بی سیم، قابلیت شارژ با سری های چندگانه و سرعت های مختلف برای ریلکس کردن ماهیچه ها این ماساژور دستی، ماساژور دستی ایده آل برای بعد از تمرین می باشد

بابت خرید این محصول از شما تشکر می کنیم. لطفا قبل از استفاده این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید تا از عملکرد و کارکرد مناسب اطمینان یابید. لطفا این دفترچه راهنما را جهت استفاده های بعدی به طور مناسب نگهداری کنید

## فهرست

۱	نکات ایمنی
۲	نام و عملکرد هر کدام از اجزا
۳	ساختار
۳	سری های ماساژ
۴	کنترل پنل
۴	راهنمای استفاده از کنترل پنل
۵	روش نصب
۶	راهنمای استفاده
۶	بررسی های اولیه
۶	راهنمای استفاده
۶	موارد بعد از استفاده
۷	مراقبت و نگهداری
۷	دستورالعمل مراقبت
۷	نکاتی در صورت گرم شدن
۸	عیب یابی
۸	مشخصات محصول

ردیف	علائم	دلایل ممکن	راه حل های ممکن
۱	در هنگام استفاده صدا شنیده می شود	این صدا طبیعی است و به دلیل (حرکت) قسمت های مکانیکی در حال حرکت ایجاد می شود	نیاز به هیچ گونه اقدامی نیست
۲	دستگاه شروع به کار نمی کند	دستگاههای اتصال دسته باتری کثیف یا شل شده است	لطفا دستگاه را به نمایندگی های (مجاز) خدمات پس از فروش ببرید
۳	ماساژور دستی در هنگام استفاده متوقف می شود	زمان پیش فرض به اتمام رسیده است	بعد از ۱۵ دقیقه جهت شروع به کار مجدد دکمه پاور را فشار دهید
۴	نور LED روی دسته باتری خاموش شده است	چک کنید که کلید (سوئیچ) تعبیه شده روی پاور باتری روی حالت ON باشد	باتری را شارژ کنید و دستگاه را مجددا روشن کنید
۵	در هنگام استفاده دود مشاهده می شود و یا بوی غیر معمول به مشام می رسد	دستگاه معیوب است	دکمه پاور روی دسته باتری را روشن کنید
۶	طول عمر باتری کاهش یافته است، دستگاه شارژ نمی شود	طول عمر باتری تمام شده است	لطفا باتری را با باتری جدید تعویض کنید

اگر مشکلات باقی ماند، لطفاً با نمایندگی های (مجاز) خدمات پس از فروش جهت تعمیر و نگهداری تماس بگیرید

شماره تماس واحد خدمات پس از فروش: ۰۲۱۸۸-۴۴۹۰۰  
۰۹۱۲۸۱۹۷۶۷۹

## مشخصات محصول

نام محصول: ماساژور تنگی  
مدل: RT-1052  
ولتاژ مجاز: ۲۱ ولت  
توان مجاز: ۲۱ وات

## موارد احتیاط ایمنی

قبل از استفاده همه هشدارها را به دقت مطالعه فرمایید

اقدامات احتیاطی و هشدارهای فهرست شده در زیر به اطمینان از عملکرد صحیح این دستگاه کمک می کند  
به منظور نشان دادن میزان خطر و خرابی حوادثی که در اثر استفاده نادرست رخ می دهد به دو بخش هشدار و احتیاط طبقه بندی شده اند. تمامی هشدارها و احتیاط های زیر را مطالعه فرمایید و تمامی دستورالعمل های ذکر شده در این دفترچه راهنما را به کار ببرید

	<b>هشدار</b>	استفاده نامناسب ممکن است باعث آسیب دیدن فرد استفاده کننده شود
	<b>احتیاط</b>	استفاده نامناسب ممکن است باعث آسیب دیدن فرد استفاده کننده و یا دستگاه شود
		ممنوع علامت سمت چپ نشان دهنده این است که جدا کردن قطعات مجاز نیست
		اجباری علامت سمت چپ نشان دهنده این است که دوشاخه بعد از استفاده باید از برق جدا شود

## هشدار

زمانی که دستگاه توسط فرد دارای بیماری و یا دارای ناتوانی جسمی در حال استفاده است باید یک ناظر در کنار ایشان باشد و حضور یک ناظر آگاه الزامی است

	<b>اجباری</b>	ما توصیه می کنیم که افرادی که داری یکی از شرایط ذکر شده در زیر هستند قبل از استفاده از دستگاه با پزشک خود مشورت کنند کسانی که در قلبشان باتری قلب دارند یا دستگاه های الکترونیکی در بدن خود دارند افرادی که تحت درمان پزشک هستند، و دارای بیماری های خاص هستند افراد دارای تومور بدخیم یا آبسه های بدخیم افراد دارای مشکلات پوستی جدی و یا دارای پوست آسیب دیده خانم های باردار یا خانم ها در دوران قاعدگی افراد مبتلا به پوکی استخوان یا دارای شکستگی ستون فقرات افراد دارای تب شدید
	<b>ممنوع</b>	زمانی که دستگاه توسط فرد دارای بیماری و یا دارای ناتوانی جسمی در حال استفاده است باید یک ناظر در کنار ایشان باشد و حضور یک ناظر آگاه الزامی است به کودکان اجازه ندهید که از این محصول استفاده و یا با این محصول بازی کنند استفاده از این دستگاه ماساژور تنگی در قسمت سر، گردن و قلب می تواند مرگ آور باشد در صورتیکه تحت نظر پزشک هستید ممکن است که با تایید ایشان قادر باشید از این دستگاه بروی ستون فقرات و یا مهره های پشت استفاده نمایید اگر دوشاخه برق آسیب دیده باشد، به سرعت دستگاه را از پریز جدا کنید و از دستگاه استفاده نکنید جهت جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه اطمینان حاصل کنید که آب و مایعات دیگر وارد دستگاه نشود، اگر دستگاه داخل آب یا مایعات دیگر افتاد، از دستگاه استفاده نکنید و دستگاه را خودتان باز و تعمیر نکنید، لطفاً دستگاه را به مراکز خدمات پس از فروش مجاز ببرید لطفاً انگشتان، موها و قسمت های دیگر بدن را جهت جلوگیری از آسیب به خودتان و دستگاه، در نزدیک محور ضربه ای قرار ندهید
	<b>ممنوع</b>	هیچ شخصی به جز کارشناسان فنی شرکت نباید اقدام به تعمیر یا بازکردن محصول نمایند. در صورتی که مشکلی برای دستگاه پیش آمد با مرکز خدمات پس از فروش مجاز تماس حاصل فرمایید قطعات را جدا نکنید

⚠ احتیاط

<p>ما توصیه می کنیم که بیش از ۱۰ دقیقه به طور مداوم از دستگاه استفاده نکنید</p> <p>از قراردادن اجسام سنگین بر روی دستگاه خودداری کنید، با دست خیس به دکمه های کنترل دست نزنید</p> <p>دستگاه را به طور مستقیم بر روی نواحی استخوانی بدن استفاده نکنید، ضربات کوبنده ی قدرتمند می تواند باعث کبودی شود، لطفاً درجه مناسب شدت را انتخاب کنید</p> <p>جهت جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه به علت گرم شدن بیش از حد و جلوگیری از آتش سوزی، هنگام استفاده از دستگاه، دستگاه را با فرش و یا بالشت نپوشانید</p> <p>جهت جلوگیری از گرمای بیش از اندازه ی قطعات داخلی، قسمت های باز عبور هوا را با هیچ وسیله ای نپوشانید. جهت جلوگیری از آسیب دیدگی در هنگام استفاده اجازه ندهید جسم خارجی وارد قسمت های باز دستگاه شود</p> <p>جهت تمیز کردن دستگاه، دستگاه را در آب یا محلول های دیگر قرار ندهید</p> <p>لطفاً از آداپتور مناسب محصول استفاده کنید، جهت جلوگیری از آداپتور با نمایندگی خدمات پس از فروش مجاز تماس حاصل فرمایید</p> <p>اگر محصول از محیط ی یا دمای کم به محیط گرم انتقال یافته است، لطفاً اجازه دهید تا محصول حداقل یک ساعت در دمای جدید بماند تا از هرگونه خرابی جلوگیری شود</p> <p>باتری های متفرقه را جایگزین نکنید، انواع مختلف باتری ممکن است باعث آسیب دیدن دستگاه، نشتی باتری و یا آتش سوزی شود</p> <p>دستگاه را در جاهای دارای سطوح سخت پرتاب نکنید و از استفاده نامناسب از دستگاه خودداری کنید</p> <p>از دستگاه درمانی دیگری به طور همزمان با این دستگاه استفاده نکنید</p> <p>هنگام قطع برق دستگاه را از برق جدا کنید و تمام دکمه های کنترل را خاموش کنید</p> <p>اگر در هر نقطه ای علائم غیر عادی و یا اشکال در عملکرد مشاهده کردید، لطفاً دستگاه را خاموش کرده و از آن استفاده نکنید</p> <p>اگر دوشاخه آسیب دیده بوده، جهت جلوگیری از خطر دوشاخه باید توسط مراکز مجاز خدمات پس از فروش تعویض گردد</p> <p>لطفاً جهت جلوگیری از اتصال برق از دستگاه در محیط مرطوب استفاده نکنید</p> <p>اگر در زمان استفاده از محصول احساس غیر عادی ناخوشایندی دارید، دستگاه را به سرعت خاموش کرده و از آن استفاده ننمایید</p> <p>لطفاً سری های ماساژ را بعد از استفاده از دستگاه جدا کرده و دستگاه را در محیط امن نگه داری فرمایید</p> <p>جهت جلوگیری از احساس ناخوشایند، دستگاه را بلافاصله بعد از صرف غذا استفاده نکنید</p> <p>هنگامی که تحت تأثیر الکل هستید از دستگاه استفاده نکنید</p> <p>لطفاً در هنگام طوفان و یا وقوع زلزله و برق و همچنین در هنگام سوار کردن و یا جدا سازی قطعات، دستگاه را از پریز جدا کنید</p> <p>لطفاً با هیچ گونه اسپری و یا محلول خورنده اقدام به تمیز کردن محصول نکنید</p> <p>لطفاً هنگامی که دمای هوا بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد است از محصول استفاده نکنید، لطفاً محصول را از سطوح گرم دور نگه دارید تا از خطر آتش سوزی و هم چنین آسیب رسیدن به محصول جلوگیری شود</p> <p>هنگامی که دمای هوا کمتر از ۵ درجه سانتی گراد است از آن محصول استفاده نکنید، اتصالات ممکن است منجمد شوند و باعث افزایش اصطکاک دستگاه شود</p> <p>جهت جلوگیری از خرابی باتری و کوتاه شدن طول عمر باتری دستگاه را زمانی که دمای هوا زیر ۰ درجه سانتی گراد است شارژ نکنید</p> <p>جهت جلوگیری از آتش سوزی هنگام استفاده از دستگاه دخانیات مصرف نکنید</p>	<p>اجباری</p>
<p>⚠ احتیاط</p> <p>اجازه ندهید که محصول برای مدت طولانی در مواجهه با نور مستقیم آفتاب باشد. این موضوع ممکن است باعث از بین رفتن رنگ و یا آسیب محصول شود</p>	<p>ممنوع</p>

دستورالعمل مراقبت

تمیز کردن

- قبل تمیز کردن اطمینان حاصل کنید که دوشاخه از پریز برق جدا شده باشد
- جهت تمیز کردن سطح محصول از پارچه نرم استفاده کنید
- جهت تمیز کردن لکه ها از پارچه نرم دار استفاده کنید و سپس دستگاه را با پارچه تمیز دیگری خشک نمایید

⚠ احتیاط

- هیچ گاه با دست خیس دوشاخه را به پریز متصل و یا از پریز جدا نکنید
- هیچ گاه این محصول را با آب نشویید و هیچ گاه آب یا مایعات دیگر را داخل محصول اسپری نکنید
- برای تمیز کردن محصول از بنزین، تینر و حلال های دیگر استفاده نکنید، ممکن است باعث محو شدن رنگ و یا آسیب به دستگاه شود

مراقبت و نگه داری

- محصول را در محیطی فاقد گرد و غبار، دمای بالا و گازهای فرار نگه داری فرمایید
- زمانی که برای مدتی طولانی از محصول استفاده نمی کنید، ما توصیه می کنیم که دسته باتری جدا شده و کامل شارژ شود و محصول جهت دور نگه داشته شدن از گرد و غبار در جعبه خودش نگهداری شود. ما توصیه می کنیم که جهت جلوگیری از آسیب دیدگی دسته باتری هر ماه شارژ شود

⚠ احتیاط

- اجازه ندهید که محصول برای مدت طولانی در مواجهه با نور مستقیم آفتاب باشد. این موضوع ممکن است باعث از بین رفتن رنگ و یا آسیب محصول شود

(توصیه های حرارتی در صورت گرم شدن)

در طول استفاده روزمره، لطفاً به علائم زیر توجه فرمایید:

- بوی سوختگی
- خاموش و روشن شدن غیر معمول دستگاه هنگام تکان دادن و لمس سیم برق، دستگاه غیر عادی روشن و خاموش می شود
- داغ بودن کابل برق
- علائم غیر عادی دیگر

⚠ هشدار

- در صورت مشاهده هر یک از علائم بالا جهت جلوگیری از آسیب و یا هرگونه حادثه احتمالی استفاده از دستگاه را متوقف کنید
- دستگاه را خاموش کنید و از برق جدا کنید و جهت تعمیر دستگاه با نمایندگی های خدمات پس از فروش مجاز تماس حاصل فرمایید
- بدون اجازه اقدام به تعمیر دستگاه و یا جداسازی قطعات نکنید

بررسی های اولیه

- قبل از استفاده محصول (دستگاه) را با دقت کنترل کنید
- برای اولین استفاده از دستگاه باتری را به مدت ۶ ساعت شارژ کنید تا اطمینان یابید که باتری کامل شارژ شده است. شما می توانید باتری را هنگامی که دسته باتری به محصول متصل است شارژ کنید و یا می توانید دسته باتری را جدا کرده و سپس شارژ کنید
- جهت شارژ کردن باتری از آداپتور ۲۶ ولت استفاده کنید و آداپتور را به پریز با ولتاژ ۲۰-۲۴ ولت متصل نمایید

زمانی که دستگاه در حالت شارژ است، نور ال ای دی چراغ نشانگر روی دسته باتری به صورت چشمک زن خاموش و روشن می شود، رنگ نور ال ای دی نشان دهنده وضعیت شارژ دستگاه است: نور قرمز چشمک زن نشان دهنده ی کم بودن شارژ باتری، نور زرد چشمک زن نشان دهنده ی شارژ متوسط باتری، نور سبز چشمک زن نشان دهنده ی حد بالای شارژ باتری و نور سبز ثابت نشان دهنده ی شارژ باتری به صورت کامل است



**احتیاط** ⚠️

- این دستگاه ماساژور تفننی در هنگام شارژ روشن نمی شود و کار نمی کند
- این دستگاه با توجه به ویژگی های ایمنی ساخته شده است که از جریان ، شارژ شدن و گرمای بیش از حد جلوگیری می کند، جهت حفظ سلامت باتری زمانی که دما در شرایط مناسب نیست (دما منفی)، باتری قابلیت شارژ محدودی دارد
- جهت حفظ طولانی مدت سلامت باتری، شارژ دستگاه را بالای ۵۰ درصد نگاه دارید
- لطفا قبل از اتصال به پریز سلامت دو شاخه را تایید فرمایید

زمانی که باتری به طور کامل شارژ شد، دسته باتری را به دستگاه متصل نمایید

راهنمای روش استفاده

- کلید سویچ روی دسته باتری را روی حالت ON بگذارید
- جهت روشن شدن دستگاه دکمه پاور روی کنترل پنل را فشار دهید. راهنمای استفاده از کنترل پنل را مطالعه فرمایید


**احتیاط** ⚠️ **هیچگاه ماساژور دستی را به سمت صورت خود نگیرید**

بعد از استفاده

- جهت خاموش کردن دستگاه دکمه پاور را فشار داده و برای ۲ ثانیه نگه دارید
- جهت جلوگیری از حوادث احتمالی بعد از استفاده از محصول به درستی مراقبت کنید

**احتیاط** ⚠️ این محصول به تکنولوژی مراقبت از گرمای زیاد مجهز شده است، استفاده دائمی ممکن است باعث ایجاد گرمای بیش از حد شود و سنسور محافظ گرمای جهت جلوگیری از آسیب، دستگاه را خاموش کند. بعد از خنک شدن، دستگاه را مجددا روشن کنید

ساختار

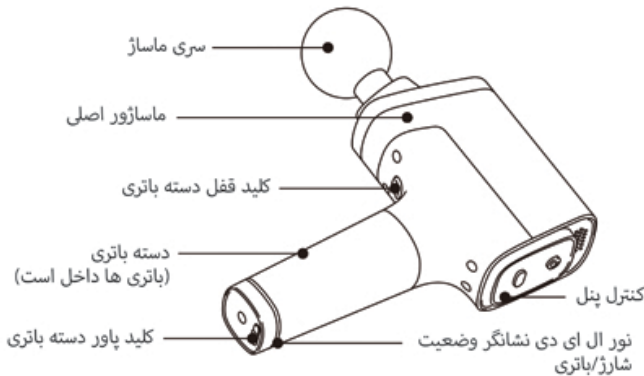

سری های ماساژ


- سری شیبه کف دست**  
به طور معمول برای شکر و کمر استفاده می شود
- سری سلیکونی**  
مناسب برای تمامی بخش های بدن
- سری چنگالی**  
به طور معمول برای ستون فقرات استفاده می شود
- سری دایره ای**  
به طور معمول برای گروه ماهیچه های بزرگ استفاده می شود

**احتیاط** ⚠️

- وسيله های سنگین را روی این محصول قرار ندهید
- هیچ گاه روی محصول نایستید و نشینید
- زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید جهت جلوگیری از روشن شدن اتفاق دستگاه توسط کودکان دکمه پاور را خاموش کنید و دستگاه را در محل مناسبی نگه داری کنید

- سری تخت**  
به طور معمول برای اندام ها و شانه ها
- سری استوانه ای (گلوله ای شکل)**  
مناسب برای مفاصل، بافت های عمیق و نقاط تحت فشار

کنترل پنل

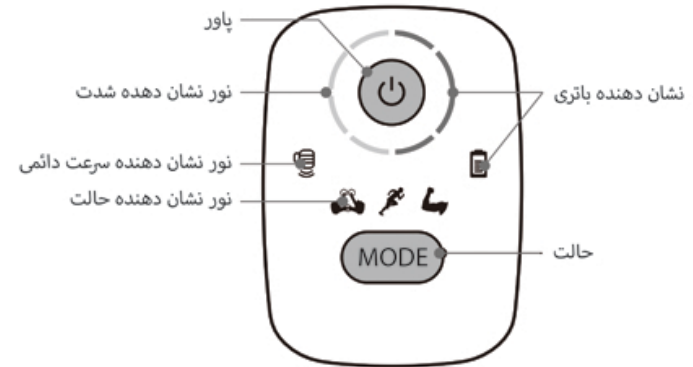

راهنمای استفاده از کنترل پنل

- پاور** (Power): جهت روشن شدن محصول دکمه پاور را فشار دهید، با حالت سرعت متوسط شروع به کار می کند، جهت تغییر به حالت شدت بیشتر این دکمه را مجدداً فشار دهید (از سطح ۱ تا سطح ۴) جهت خاموش کردن دستگاه دکمه پاور را فشار داده و برای ۲ ثانیه نگه دارید.
- حالت** (MODE): زمانی که دستگاه روشن شد، دکمه MODE را برای تغییر حالت های ماساژ فشار دهید. فشار سریع بر روی دکمه پاور ماساژ را به حالت سرت دائمی برمی گرداند.

چراغ نشان دهنده وضعیت باتری

چراغ نشانگر وضعیت باتری (۴ خط در سمت چپ دکمه پاور): زمانی که باتری کامل شارژ دارد هر ۴ خط با هم روشن می شوند، نشان دهنده شارژ باتری زمانی که شارژ باتری کم باشد شروع به چشمک زدن می کند. (نیاز به شارژ)

نور نشان دهنده شدت

نشان دهنده سطح شدت (۴ خط سمت راست دکمه پاور): هرچه خط های بیشتری روشن باشد، سطح شدت قوی تر و بیشتر است.

چراغ نشان دهنده سرعت پایدار

وقتی دستگاه در حالت سرعت پایدار است این چراغ روشن می ماند.

⚠ احتیاط

- ◀ زمان پیش فرض دستگاه ۱۰ دقیقه می باشد و بعد از ۱۰ دقیقه دستگاه متوقف می شود. برای راه اندازی مجدد دکمه پاور را فشار دهید.
- ◀ به طور پیوسته دستگاه را خاموش و روشن نکنید. قبل از روشن کردن مجدد برای ۳ ثانیه صبر کنید.
- ◀ جهت جلوگیری از هرگونه آسیب دیدگی از داخل کردن دست خود داخل قسمت های باز دستگاه در هنگام کار خودداری کنید.
- ◀ دستگاه را خارج از دسترس کودکان و حیوانات خانگی نگه داری کنید.
- ◀ از ریختن آب و یا مایعات دیگر بر روی کنترل پنل خودداری کنید.
- ◀ جهت جلوگیری از آسیب دیدگی، دستگاه را از کابل برق بلند و حمل نکنید.

روش نصب



- ◀ دسته باتری را به شکاف دستگاه متصل کنید ، از محکم شدن دسته باتری در جایگاه خود اطمینان حاصل کنید. جهت اطمینان یافتن و چک کردن مجدد اتصال صحیح دسته باتری، دسته باتری را کمی بکشید.
- ◀ جهت نصب سری ماساژ، دستگاه را خاموش کنید، قسمت محدب سر ماساژ (شیار سری ماساژ) را با شیار ماساژور دستی تراز کنید، به آرامی سری ماساژ را جا بزنید و اطمینان حاصل کنید که به درستی جا افتاده باشد.

- ◀ قبل از استفاده اطمینان حاصل کنید که دسته باتری و سری ماساژ به درستی جا افتاده باشد و در جای خود قرار گرفته باشند.
  - ◀ جهت خارج کردن دسته باتری، کلید قفل دسته باتری را فشار دهید و دسته باتری را به بیرون بکشید.
- ⚠ احتیاط**